

Link do produktu: <https://gabinetspa.pl/laser-do-zamykania-naczyn-ndyag-mesolaser-vessel-tower-p-2.html>



## Laser do zamykania naczyń NdYag Mesolaser Vessel Tower

Cena

**69 900,00 zł**

### Opis produktu


Kompaktowy system Mesolaser Vessel Tower został opracowany do szerokiej gamy zabiegów naczyniowych i estetycznych. Jego laser long-pulse Nd:YAG 1064/532nm o dużej mocy i regulowanej plamce w zakresie 1-6mm jest uważany za najlepszy do zamykania różnorodnych naczynek na twarzy i ciele. Pozwoli on znacząco rozszerzyć zakres zabiegów oferowanych w Państwa gabineciech.

Laser neodymowo-yagowy o długości fali 532/1064nm jest to najgłębiej penetrujący promień lasera dostępny na rynku, dzięki temu może niszczyć naczynia głęboko schowane pod skórą oraz trudne do osiągnięcia mieszki włosowe. Głęboka penetracja lasera Nd:YAG Long Pulse efektywnie koaguluje głębokie struktury naczyniowe, zapewnia głęboką regenerację kolagenu w wyniku zabiegów frakcjonujących. Niska absorpcja fali Nd:YAG przez skórę pozwala prowadzić zabiegi przy różnych fototypach skóry i zapewnia komfort i bezpieczeństwo. Dodatkowo mniej ciepła pojawia się na zewnętrznej warstwie skóry, co redukuje potrzebę agresywnego chłodzenia.

Sterowanie funkcjami urządzenia odbywa się za pomocą dotykowego ekranu LCD.

Urządzenie posiada certyfikat medyczny CE zgodny z dyrektywą 93/42/EEC wykonany przez laboratorium notyfikowane, co gwarantuje najwyższy poziom testów bezpieczeństwa aparatu jak również jakości jego konstrukcji i działania.

Podczas procesu zamykania naczynek za pomocą specjalistycznego lasera Nd:Yag Long Pulse światło lasera dociera w głąb naczyń, gdzie jest absorbowane przez hemoglobinę oraz oxyhemoglobinę zawartą w czerwonych krwinkach i zamieniane na energię ciepłą. W celu usunięcia zmian naczyniowych na twarzy konieczne jest wykonanie od 1-4 zabiegów co 2-4 tyg. Drobne pajączki, naczyniaki itp. jak na przykład na płatkach nosa likwidowane są najczęściej podczas jednej wizyty.

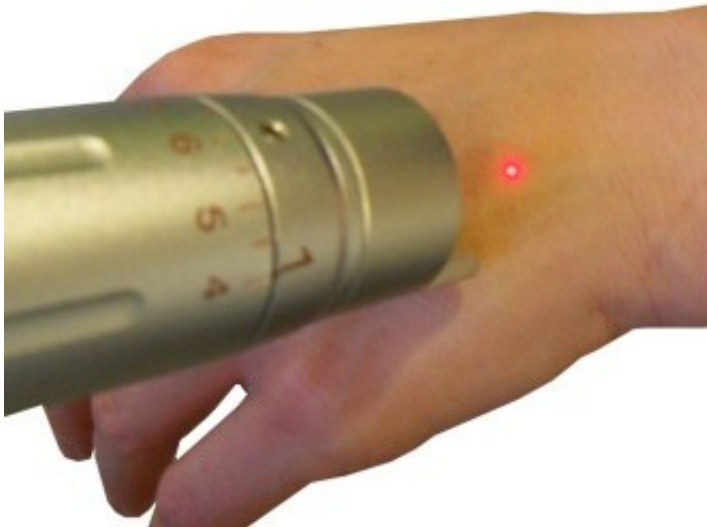

Wyjątkowa skuteczność i precyzja wykonywanych zabiegów osiągana jest między innymi dzięki możliwości ustawienia bardzo małej plamki zabiegowej. Promień lasera skutecznie przenika do interesujących nas obszarów nie naruszając powierzchni skóry. Dzięki specjalnemu pilotującemu "celownikowi" laserowemu który pomaga nam w dokładnym wycelowaniu wiązki zabiegowej śledzenie naczynia jest proste i doskonale widoczne. Poziom jasności plamki "celownika" można regulować w zależności od potrzeb podczas zabiegu tak aby blask nie przesłaniał mniejszych naczynek.

**Na poniższym filmie przedstawiamy zabieg zamykania naczynek w powiększeniu.**

**Poniżej przedstawiamy efekty kilku typowych zabiegów wykonywanych za pomocą Mesolaser Vessel w naszym gabinecie.**



Zamykanie pajęczków na nosie - 1 zabieg, przed i 3 godz. po zabiegu.

2.



Zamknięcie naczynka (spot) - 1 zabieg, przed zabiegiem i 30 dni po zabiegu.

3.



Zamykanie pajęczków na twarzy - 1 zabieg, przed zabiegiem i 30 dni po zabiegu.

4.



Zamykanie pajęczków na udzie - 1 zabieg, przed zabiegiem i 14 dni po zabiegu.